

**MOC63u Shimadzu Feuchtebestimmer
 Waage zur Feuchtigkeitsbestimmung**



Feuchtebestimmer Shimadzu MOC 63u CH Moisture-Analyzer Waage mit Automatikprogramm, 10 Speicherplätzen und Grafik-Display. Sehr einfach zu bedienender Feuchtebestimmer vom Shimadzu. Ideal zur Bestimmung der Feuchtigkeit in Lebensmitteln, Kunststoffen, Medikamenten, Cannabis etc.

- **Shimadzu MOC 63u**
- **Waage zur Feuchtigkeitsbestimmung**
- Automatikprogramm
- CH Trocknungsprogramm
- Bisherige Trocknungszeit
- Aktuelle Temperatur
- Einheit der Ergebnisanzeige
- Mom. Feuchteanteil in %
- Trocknungsmodus
- Statusanzeige Trocknung
- Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
- Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 10 Trocknungsprogrammen
- Datum + Uhrzeit Anzeige
- Einfache Bedienung







Zum Vergrössern, Bild anklicken.



Modell	MOC 63u CH Feuchtebestimmer
Ablesbarkeit [d]	0,001 g/ 0,01 %
Wägebereich [Max]	60 g
Reproduzierbarkeit bei Einw aage 2 g	0,15 %
Reproduzierbarkeit bei Einw aage 10 g	0,02 %
Gewichtsverlust [g] (GV)	Absolutwert in [g]
Temperaturbereich	50 - 200 °C in Schritten zu 1 °C
Abschaltkriterien	- Wenn eingestellte Zeit abgelaufen (1 min - 4 h) - Wenn Gewichtsverlust pro Zeiteinheit den Sollwert unterschreitet (30 sec)
Messwertabfrage	Intervall einstellbar von 1 sec - 10 min
Gesamtabmessungen B x T x H	202 x 336 x 157 mm
Preis	1690.-

MOC63u Shimadzu
Feuchtebestimmer
Waage zur Feuchtigkeitsbestimmung
~~Fr. 1890.00~~
sofort lieferbar

Fr. 1690.00

Zubehör		Preis
	Probenschalen (Aluminium) sofort lieferbar	Fr. 81.00
	Glasfaser-Rundfilter z. B. für spritzende und verkrustende Proben sofort lieferbar	Fr. 95.00
	Temperatur-Kalibrierset für MOC 63u CH sofort lieferbar	Fr. 499.00
	Matrixdrucker EP-100 CH sofort lieferbar	Fr. 790.00
	Antivibrationstisch Wägetisch mit Granitplatte grosse Arbeitsfläche 2 Teilig sofort lieferbar	Fr. 1435.00

UniBloc Moisture Analyzer MOC63u



MOC63u High-performance Moisture Analyzer applicable for a wide application range.

Main features of MOC63u

Easy operation

-Automatic starting mode-



Easy-to-operate software and key layout. Automatic starting mode saves measurement time.

Backlight display



Illuminated display provides comfortable display visibility in all settings.

Compact design

MOC63u is one of the most compact instruments in its class. Width is only 202 (mm).

Data management -WindowsDirect-

The measurement conditions and data can be stored in MOC63u.

Data IO for printer, RS-232C and USB connection for PC are available as standard. Send balance data to Excel or other Windows applications.



Maintenance

It's very easy to clean up and replace the halogen lamp.



Large pan size



Large sample pan: ϕ 95mm diameter

Long lifetime halogen heater



Halogen heater promises you quick and accurate measurement.




Measurement modes of MOC63u

Choose the right measuring mode for your application.

Ending modes


• Automatic ending mode

Automatically ends measurement when moisture loss over the previous 30 seconds becomes smaller than specified percentage.

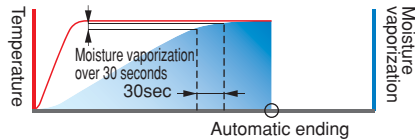

• Timed ending mode


Automatically ends measurement when the specified amount of time has elapsed.

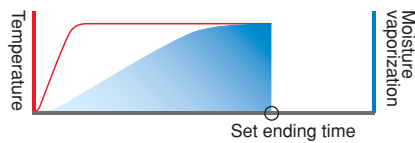

Alternate drying modes


• Rapid drying mode

First dries with the highest temperature for the specified period, then shifts to the specified temperature shortening measurement time.

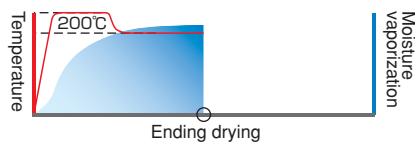


• Slow drying mode

Gently heats samples that might solidify at the surface or samples that reduce under high temperature.

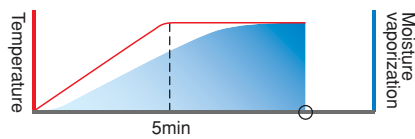

• Step drying mode

Allows step-by-step changes in drying conditions. This feature is useful when measuring samples that contain a large amount of water.

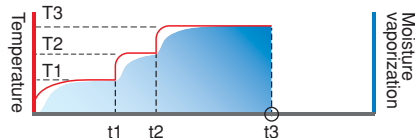

Starting mode

• Automatic starting mode

Starts measurement immediately after closing the lid. It will save time in repeated measurement.




Measurement data

With WindowsDirect




For food industry

Measurement data of soft flour

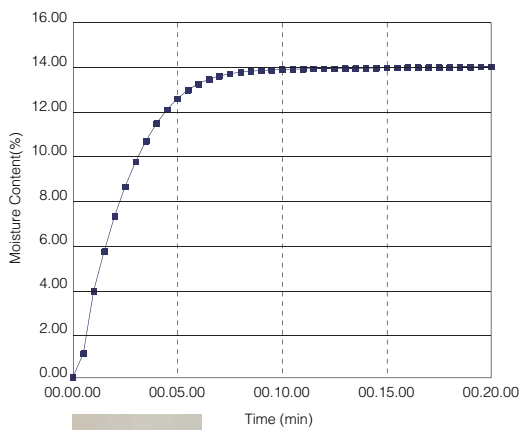

Soft flour

Measurement data of milk

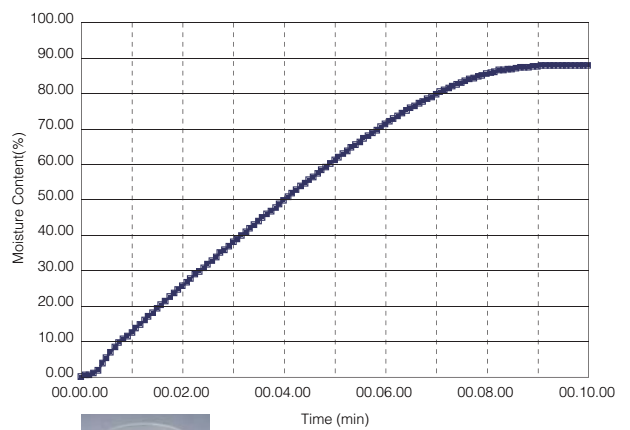


Milk



For chemical industry

Measurement data of resin pellet

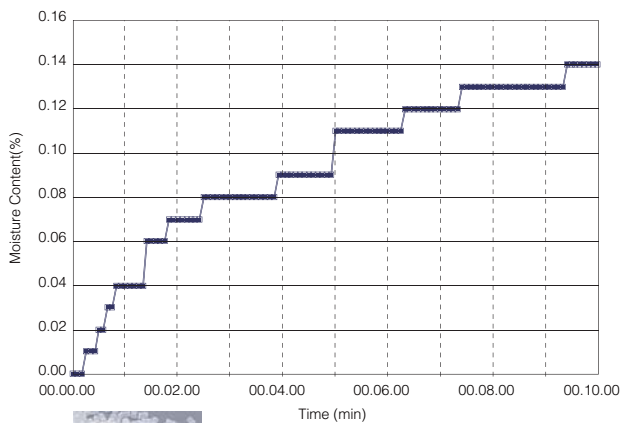


Resin pellet



Standard sample

Measurement data of the sodium tartrate dihydrate

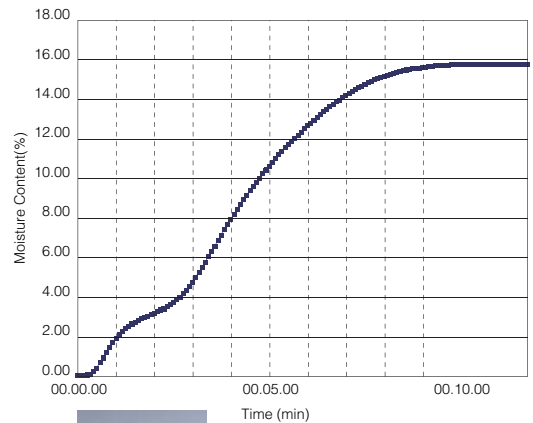

Sodium

Excellent performance for a wide variety of applications in multiple industries.



For food industry

- Inspection of harvest
- Quality assurance of processed food



For environmental industry

- Measurement of polluted sludge
- Measurement of the by-product of biofuel production



For chemical industry

- Quality control of paint
- Inspection material in the manufacturing process



For Pharma industry

- Quality assurance of drugs
- Inspection of cosmetics

Durable, high-performance aluminum alloy mass sensor


UniBloc Since 1989

The MOC63u incorporates a one-piece aluminum alloy mass sensor technology (UniBloc), first introduced by Shimadzu for precision balances in 1989. It excels in performance, and resists deterioration and damage by ordinary impacts. The UniBloc's compact, uniform structure replaces 70 parts found in a conventional electromagnetic balance sensor assembly and ensures stable temperature characteristics, excellent response time and stable corner-load performance.

The UniBloc design permits a consistency of production that assures reliability and a long operational life.



3 Benefits of UniBloc.

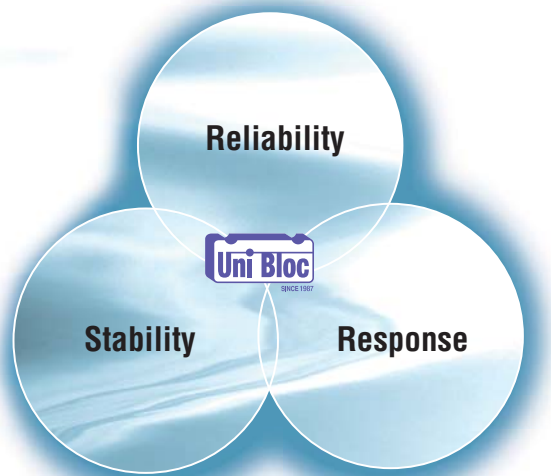

■ MOC63u Specifications

Capacity	Max	60 g
	Min	0.02g
Minimum readability		0.001g
		0.01/0.1% (Selectable)
Repeatability		0.15% (2g)
		0.05% (5g)
		0.02% (10g)
Drying Heater		Straight type halogen heater
Power		400W
Temperature range setting		50-200°C (1°C increments) (There is a time restriction when exceeding 180°C.)
Display		LCD with backlight
Pan size		φ 95mm
Dimensions (WxDxH) mm		202 × 336 × 157
Weight		4kg
Operational temperature and humidity range		5 to 40°C, 85%RH or lower

Measurement modes	Standard (Easy start/Automatic end/Timed end)
	Rapid drying (Easy start/Automatic end/Timed end)
	Slow drying (Easy start/Automatic end/Timed end)
	Step drying (Easy start/Automatic end/Timed end)
Timer setting	1-120 minutes or continuous (max 12 hours)
Interface	RS-232C (9-pin connector) I/O port
	USB port
Measurement conditions data memory	10
Data memory	100
Temperature calibration kit	Option

■ Accessories list

Standard accessories	Optional accessories
1 Sample pan	1 Printer EP-80
2 Aluminum sheet	2 Printer EP-90
3 tongs	3 In-use protection cover for display (5 pieces)
4 In use protection cover	4 Aluminum sheet
5 Fuse	5 Fiberglass sheet
	6 Temperature calibration kit
	7 Sample pan (SUS)
	8 RS-232C cable
	9 USB connection cable
	10 Halogen heater for replacement



⚠ Safety Precautions

Read instruction manual before using this instrument.

- Use this instrument for measurements in which water vaporizes from the sample under heating.
- The temperature of the heater installed in this instrument becomes higher than the set heating temperature for the sample.
- Any sample that is explosive, inflammable or may cause hazardous reaction under heating must not be measured with this instrument.



SHIMADZU CORPORATION. International Marketing Division

3. Kanda-Nishikicho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8448, Japan Phone: 81(3)3219-5641 Fax: 81(3)3219-5710
<http://www.shimadzu.com/>

SHIMADZU SCIENTIFIC INSTRUMENTS, INC.
 7102, Riverwood Drive, Columbia, Maryland
 21046, U.S.A.
 Phone: 1(410)381-1227
 Fax: 1(410)381-1222
<http://www.ssi.shimadzu.com/>

SHIMADZU EUROPA GmbH
 Albert-Hahn-Strasse 6-10, 47269 Duisburg,
 F.R. Germany
 Phone: 49(203)7687-0
 Fax: 49(203)7666-25
<http://www.shimadzu.eu/>

SHIMADZU (ASIA PACIFIC) PTE LTD.
 79 Science Park Drive, #02-01/08, Cintech IV,
 Singapore Science Park 1, Singapore 118264
 Phone: (65)6778-6280
 Fax: (65)6779-2935
<http://www.shimadzu.com.sg/>

SHIMADZU INTERNATIONAL TRADING
 (SHANGHAI) CO., LTD.
 PUXI BRANCH
 Block E, No. 570 West Huaihai Road, Shanghai
 200052 P.R. China
 Phone: 86(21)2201-3888
 Fax: 86(21)2201-3666
<http://www.shimadzu.com.cn/>

SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.
 Avenida Marques de Sao Vicente,
 1771 Barra Funda
 CEP: 01139-003 - Sao Paulo, SP - Brazil
 Phone: 55(11)2134-1688
 Fax: 55(11)3611-2209
<http://www.shimadzu.com.br/>

SHIMADZU MIDDLE EAST & AFRICA FZE
 UAE HEAD OFFICE
 Warehouse No. RA08UC02, Jebel Ali, Dubai
 P.O. BOX 262081 United Arab Emirates
 Phone: 971(4)883-6668
 Fax: 971(4)883-6808

SHIMADZU SCIENTIFIC INSTRUMENTS
 (OCEANIA) PTY. LTD.
 Unit F, 10-16 South Street, Rydalmere N.S.W.
 2116, Australia
 Phone: 61(2)9684-4200
 Fax: 61(2)9684-4055
<http://www.shimadzu.com.au/>